



Biosistemas
Calidad total al servicio de la vida



Recuento diferencial Leucocitario

Sistema HemoCue® WBC DIFF, Origen Suecia

Descripción: Sistema de análisis por imagen que caracteriza los leucocitos que han sido teñidos, los identifica y realiza el recuento diferencial.


Parámetros: Recuento total de leucocitos (glóbulos blancos) y diferencial (en números absolutos y %) para:

- ✓ Neutrófilos.
- ✓ Linfocitos.
- ✓ Monocitos.
- ✓ Eosinófilos.
- ✓ Basófilos.




Características:

- Diagnóstico precoz de infección en pocos minutos.
- Reduce la prescripción innecesaria de antibióticos.
- No necesita calibración.
- Cubetas desechables y con mínima exposición a la sangre.
- Muestras de sangre total capilar o venosa (EDTA).
- Potencia -Adaptador de CA o pilas
- Interfaz- Impresora, teclado, lector de códigos de barras y PC
- Intervalo de medición:
 - 0,3-30,0 x 10⁹/L
 - (300-30.000/mm³, 300-30.000/μL)
- Tiempo de medición: En 5 minutos
- Volumen de la Muestra: 10 μL
- Dimensiones: 188 x 157 x 155 mm
- Peso: 1.300 g

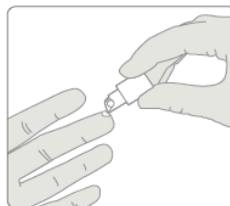

1 Llene la microcubeta.

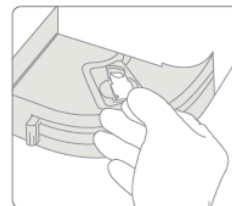

2 Introduzca la microcubeta en el analizador.



3 Visualice los resultados.



Empresa Certificada

Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalaja 2146, Montevideo, Uruguay

Tel. (598)2 409 8151 / Fax. (598) 2400 3409

Cel. 091 384 977

ventas@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.uy

